


# NanoFrax RF


## Fractional Microneedling RF



Το Micro-needling είναι μια δημοφιλής, ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, που χρησιμοποιεί λεπτές βελόνες και προάγει την παραγωγή κολλαγόνου. Η αισθητική αυτή διαδικασία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των δερματικών προβλημάτων, όπως σημάδια ακμής, ραγάδες ή ρυτίδες.

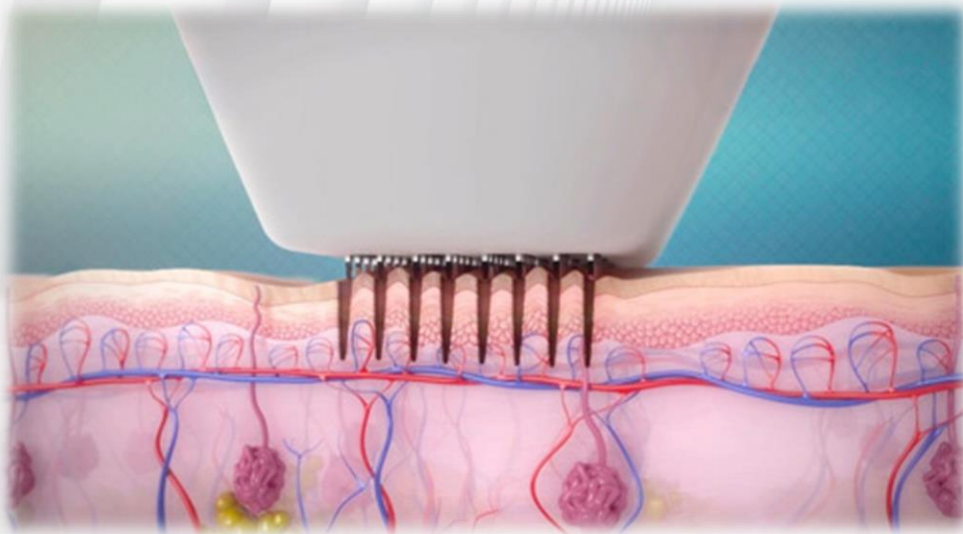

Ο συνδυασμός του **Micro-needling** με τη **Ραδιοσυχνότητα (RF)** ► παράγει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές συσκευές micro-needling. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με τη βαθύτερη διείσδυση της βελόνας όσο και από την ενισχυμένη ικανότητα παραγωγής κολλαγόνου λόγω των ραδιοσυχνοτήτων. Η βαθιά εκπεμπόμενη θερμοκρασία προάγει την σύσφιξη και την λάμψη της επιδερμίδας όπως και την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης.

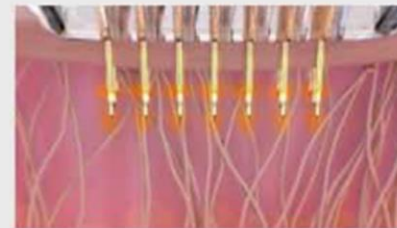

Η τεχνολογία του fractional microneedling RF στοχεύει στην παροχή θερμότητας μέσω βελόνων που διεισδύουν στο δέρμα σε ένα προκαθορισμένο βάθος. Καθώς μεταφέρεται η θερμότητα μέσω της βελόνας, υπάρχει ελάχιστη θερμική ζημιά στην επιδερμίδα.

Ο συνδυασμός ραδιοσυχνότητας και Microneedling αυξάνει τον όγκο στο δικτυωτό χόριο, την κυτταρικότητα, την περιεκτικότητα σε υαλουρονικό οξύ και ελαστίνη και αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα στους νέους δερματικούς ιστούς στις υπό θεραπεία περιοχές εντός 10 εβδομάδων. Η νέο-ελαστινογένεση δεν παρατηρείται στον ίδιο βαθμό στο microneedling, όπως σε μια συνδυαστική θεραπεία με ραδιοσυχνότητες.

Ακριβής έλεγχος  
βάθους διείσδυσης

Λειτουργία vacuum

Βηματικός  
κινητήρας κεφαλής

Μονωμένες βελόνες



## Τι πετυχαίνουμε με το NanoFrax RF



Σύσφιξη



Lifting



Ελαστικότητα



Stretching προσώπου



Ρυτίδες



Σημάδια ακμής

## Πλεονεκτήματα θεραπείας

- **Επιλογή 10,36, 64 pins:** Με ή χωρίς μόνωση
- **Επίχρυσες βελόνες:** Υψηλή βιο-συμβατότητα
- **Stepping Motor – Vacuum:** Οι βελόνες διεισδύουν ομαλά στο δέρμα με ασφάλεια
- **Ακριβής έλεγχος βάθους διείσδυσης:** Ρυθμιζόμενο βάθος 0,5-3,5mm
- **Κεφαλή με σχεδίαση φιλική προς τον χρήστη:** Εργονομικός και ελαφρύς σχεδιασμός
- **Μεγάλη Οθόνη 10,4”:** Ρυθμιζόμενη ως προς τη θέση και φιλικό προς τον χρήστη Μενού.



Εφαρμογές



Αποτελέσματα






Μεγάλη Οθόνη 10,4" – Εύκολο περιβάλλον χρήστη

Επιλογή προσώπου ή σώματος

6 διαφορετικές περιοχές θεραπείας

Αποθήκευση παραμέτρων θεραπείας

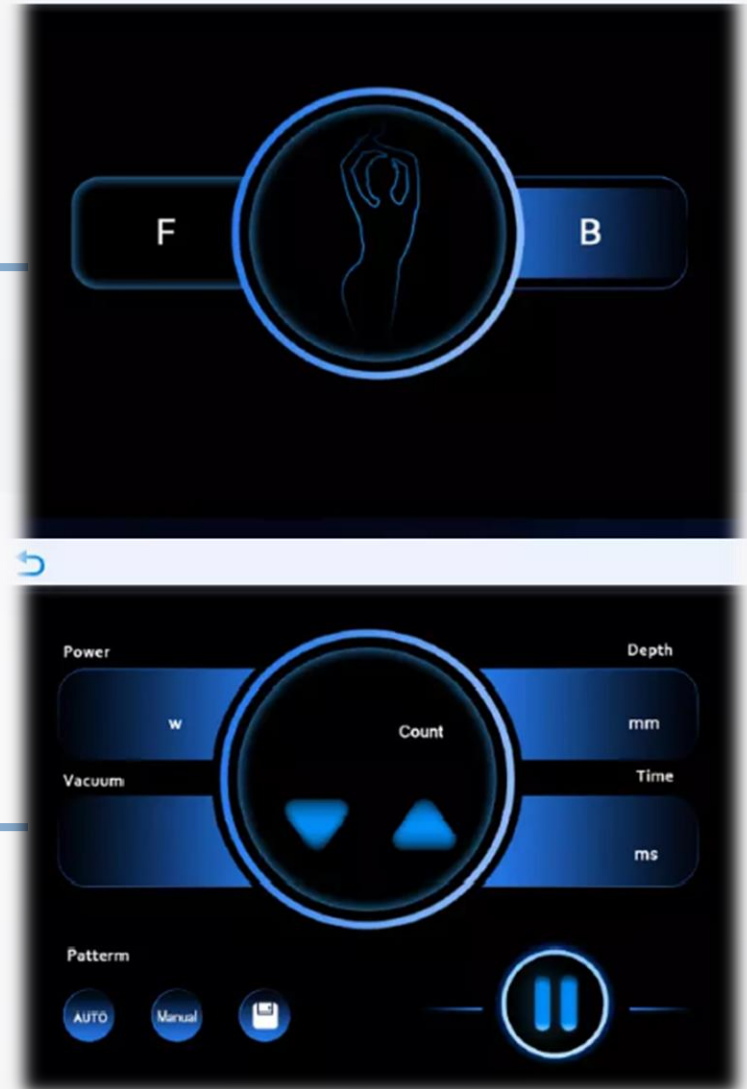

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
RF Frequency	1000Hz
Μέγιστη Ισχύς	35W
Βελόνες	10pins, 36pins, 64pins
Μέγεθος βελόνας	200μm
Βάθος διείσδυσης	0,5-3,5mm
Μέγεθος Οθόνης	10,4"
Διαστάσεις	50x50x110cm
Καθαρό Βάρος	40kg

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

# DERMACON

Δελφών 5, Χαλάνδρι ΤΚ15233

T. 2106777540 E. [dermacon@dermacon.gr](mailto:dermacon@dermacon.gr)